

CHIRURGIE BUCCO-MAXILLAIRE | PARODONTOLOGIE | IMPLANTOLOGIE

#### **IMPLANTOLOGIE**

### **Applications**

- Incisions proximales (mésiales et distales) et dans les espaces inter-dentaires
- Incisions papillaires
- Incisions palatines (lambeaux et prélèvements de greffons conjonctifs)
  - Incisions pour chirurgies délicates muco gingivales
  - Incisions crestales (en implantologie)
  - Incisions sulculaires en zones vestibulaires ou linguales
  - Incisions verticales dans les secteurs antérieurs (supérieurs ou inférieurs)
  - Incisions sulculaires, papillaires en zones étroites ou rendues difficiles d'accès aux lames 15 et 15 C












# Bistouris à usage unique

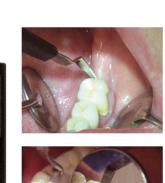







#### **Applications**

- Incisions proximales (mésiales et distales) et dans les espaces inter-dentaires
- Incisions papillaires
- Incisions palatines (lambeaux et prélèvements de greffons conjonctifs)
- Incisions pour chirurgies délicates muco gingivales
- Incisions crestales (en implantologie)
- Incisions sulculaires en zones vestibulaires ou linguales
- Incisions verticales dans les secteurs antérieurs (supérieurs ou inférieurs)
- Incisions sulculaires, papillaires en zones étroites ou rendues difficiles d'accès aux lames 15 et 15 C

#### Caractéristiques techniques des lames

- Lames en acier suédois haute performance Sandvik Bioline <sup>®</sup>
- Usage unique (stérilisation OE)
- Affûtage double biseau de type A.A.S.
- Conditionnement à l'unité en sachet plastique transparent
- Emballage : boîte de 10 lames (BW SB) boîte de 5 lames(BH)
- Conformité avec la directive CE 93/42

**(**E 0120

Porte-lames

#### **TUNNELISATION**

# **Applications**

- Incisions intrasulculaires
- Tunnelisation
- Intervention par enveloppe
- Chirurgie de lambeaux déplacés apicalement ou latéralement
- Greffes double-papilles
- Desépithélialisation VIDER SB004



(All Around Sharpened)

Les bistouris MJK Instruments bénéficient en exclusivité de l'affûtage A.A.S. (affûtage contourné et continu) qui permet d'inciser sans accroc en traction comme en poussée.

Associé à la forme unique des lames MJK Instruments, l'affûtage A.A.S., l'un des plus fins au monde, autorise des actes très ciblés, et dans la plupart des cas, en un seul trait d'incision.



1.2mm

- Confort du chirurgien
- Réduction des traumas
- Meilleures coaptation des tissus











#### **Applications**

- Porte-lames inox (IH001 & IH002) ou alliage de titane (IH001T & IH002T)
- Diamètre de prise en main 6mm (IH001 & IH001T) ou 8mm (IH002 & IH002T)
- Longueur 11cm (IH001 & IH001T) ou 14cm (IH002 & IH002T)
- Moletage de prise en main - Molette de serrage sécurisée
- Conditionnement à l'unité

La série d'écarteurs **MJK** *Instruments 'Surgy' Soft'* de formes et angulations spécifiquement étudiées, répond à toutes les situations d'intervention en chirurgie bucco-maxillaire, parodontale et implantaire.



# Applications:

Écarteur n°1 : S'adresse aux interventions dans les secteurs vestibulaires antérieurs.

Écarteurs n°2&3 : Sont plus indiqués pour les secteurs canines et prémolaires.

Écarteurs n°4&5 : Destinés plus précisément aux secteurs molaires, en vestibulaire, en lingual et en palatin, mais également dans les secteurs antérieurs, en lingual et en palatin.

# De manière générale :

Les angles les plus fermés s'adressent aux zones les moins accessibles

# Personnalisation:

L'adaptation par modelage du corps (à l'aide de la clé KE001) offre pour chaque instrument une infinité de possibilités d'accès à toute la cavité buccale.







'Swgy'Soft' est la seule série d'écarteurs de chirurgie buccale entièrement personnalisable.

# LA TROISIÈME MAIN DU CHIRURGIEN

## **Applications**

Conçues pour la chirurgie osseuse, les pinces à greffons assurent un maintien ferme et stable du greffon en position, et libèrent ainsi la main du chirurgien pour une intervention confortable et sécurisée (le forage peut se faire aisément et directement sur le site).

Crémaillère allongée pour une ouverture plus importante.

moletées, assurent une accroche parfaite sur la

surface osseuse.

Les extrémités «cuillère» (côté palatin) et «boule» (côté greffon) finement

Mors asymétriques autorisant le libre accès pour les opérations de forage et de vissage.









Tête moletée

MJK K CE APOO

CL011 Mors droits



CL021 Mors asymétriques côté droit



CL022 Mors asymétriques côté gauche

# SIMPLE, MAIS TRÈS EFFICACE

# **Applications**





- Lors de l'intervention, l'instrument peut basculer à gauche ou à droite, tout en restant en contact permanent avec le greffon afin de le maintenir en pression.





(modèle fantôme





AP001



# «Concevoir et commercialiser des instruments de Chirurgie innovants et adaptés, ingénieux et simples.»

C'est ainsi que les fondateurs de MJK Instruments ont décidé de définir leur activité.

Innovants... Pour nous différencier.

Adaptés... Pour répondre au mieux aux exigences de notre clientèle.

**Ingénieux...** Parce que c'est notre légitimité dans un marché dominé par des groupes aux moyens considérables.

Et simples... Parce que les idées les plus simples sont toujours les meilleures.

Avec, comme préoccupation permanente, l'exigence de la qualité et de l'excellence qui nous guide systématiquement dans la sélection de nos partenaires.



De sa conception à sa mise sur le marché, un produit MJK Instruments est toujours le fruit d'une étroite collaboration avec les chirurgiens les plus reconnus.

Notre volonté est de répondre aux exigences de nos utilisateurs, en offrant une gamme d'instruments ingénieux, et qui facilitent la pratique d'actes chirurgicaux sur des sites difficiles d'accès.

MJK Instruments s'est plus particulièrement positionnée sur la chirurgie dentaire et maxillo-faciale.

Les produits MJK Instruments font l'objet des démarches légales nécessaires à l'obtention du marquage CE.

Toutes les dispositions sont également prises en matière de traçabilité.

Installée depuis octobre 2007 sur le site du technopôle de Château Gombert, MJK Instruments a déménagé ses bureaux en Janvier 2015 afin de tripler sa surface de stockage et répondre ainsi à la demande croissante de sa clientèle.

La ville de Marseille, contrairement à certains clichés, offre un environnement particulièrement propice à l'épanouissement de ses entreprises.

Si elle est avant tout un choix du cœur, notre situation géographique résulte également d'une option stratégique.





#### **VOTRE DISTRIBUTEUR**

#### **MJK Instruments**

159, Chemin de Sainte Marthe 13014 Marseille

France

Tel.: +33 (0) 608 699 771 Fax: +33 (0) 491 537 260

contact@mjkinstruments.com - www.mjkinstruments.com

